



NEW

芬兰百得推出新型手动(mLine)和电子(eLine)系列移液器



精确的样品和试剂移液，对实现可靠的分析结果是至关重要的。芬兰百得(BIOHIT, www.biohit.com)系列液体处理产品广泛用于全球许多重要领域，包括电子移液器，手动移液器，移液相关消耗品和去污染产品等。百得系列液体处理产品满足所有相关的国际标准，获得了ISO9001证书、GS证书和CE证书等。吉诺思科贸有限公司不仅作为芬兰百得原装产品在中国的独家经销商，也是在中国地区的专业售后技术服务机构，向广大用户提供全部技术服务，包括：专业的保养、校正服务和技术培训等。



BIOHIT 百得mLine系列可变容量手动移液器(可整支高温高压消毒灭菌)



芬兰百得公司在成功推出可变容量手动移液器的基础上，又研制出新一代更具特色的可整支高温高压灭菌消毒(121℃或252°F，20分钟，1个大气压)的单通道和多通道可变容量的手动移液器，采用三项全新专利技术(机械专利使液体样品的处理变得更加轻松省力；安全锁定专利确保快速柔和的容量调整；圆锥滤器自动排出专利进一步避免交叉感染的发生)，各种型号和容量范围覆盖了0.5 μl - 5ml，容量可变，具有平滑的活塞运动和要求简单的实验室内校正和保养，具有人类工程学设计的优点，提供了优秀的精密度和准确度(DIN 12650)。同时具有CE和GS证书，其适合于众多的应用领域。

- 独特的内部组件热隔离设计，可整支高温消毒(121℃，20分钟，1个气压)
- 张力弹簧结构保证了极轻的吸排样力量 (专利)
- 极轻的滴头排出功能，容量调节快速柔和
- 改良和优化的精密度和准确度(DIN 12650)
- 安全锁定装置 (专利)
- 滴头圆锥滤器和独特的滤器排出功能 (专利)
- 现今为止操作最轻便的移液器



mLine系列可变容量手动移液器技术参数

订货号	颜色码	容量范围	增量	测试体积	准确度	精密度	安全滤器	使用滴头
725020	灰色 m10	0.5-10 μl	0.01 μl	10 μl 0.5 μl	1.00% 5.00%	0.60% 4.00%	无	A C L M N
725050	黄色 m100	10-100 μl	0.1 μl	100 μl 10 μl	0.80% 2.00%	0.15% 1.00%	标准型 增强型	B C D O P Q
725060	黄色 m200	20-200 μl	0.2 μl	200 μl 20 μl	0.60% 2.00%	0.15% 0.80%	标准型 增强型	B C D P Q
725070	蓝色 m1000	100-1000 μl	1 μl	1000 μl 100 μl	60% 1.50%	0.20% 0.70%	标准型 增强型	E F G S
725080	绿色 m5000	1000-5000 μl	10 μl	5000 μl 1000 μl	0.50% 1.50%	0.15% 0.60%	标准型 增强型	I J

注：移液器滴头相关信息请参阅BIOHIT滴头资料

BIOHIT 百得eLine系列单道可变容量电子移液器



eLine电子移液器是芬兰百得公司最新设计制造的新一代电子移液器，在著名的“2001芬兰设计大奖赛”中荣获金奖。


eLine电子移液器打破了传统移液器设计的束缚，实现全新水平的分析性能和个性化创新，无论左手还是右手均可操作。

eLine电子移液器采用微处理器控制的注射单元(专利)，充分显示了eLine电子移液器的超群性能。

百得eLine电动移液器提供全部标准的功能：




一般取样方式(P,Pm,Pc,Pma)

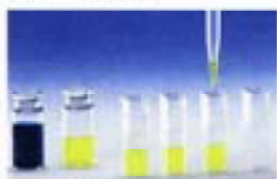

补偿取样方式(rP)




多次分液方式(d)

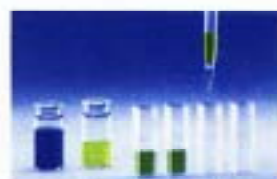

稀释取样方式(dd)



连续顺序分液方式(Sd)

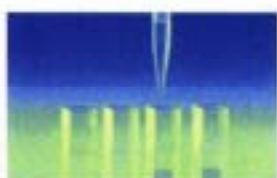

自动分液方式(Ad)



多次吸液方式(SA)



稀释后混合方式(dd+mixing)

真正的用户个性化设计：

清晰简洁的屏幕显示，简便实用的键盘操作使一切繁琐工作得以简化，特别具有的11种移液模式，包括几乎所有应用领域：

- 排液功能和循环计数功能
- 吸液和手动操作功能
- 多次分液功能
- 稀释功能
- 自动分液功能
- 在线混合功能

另外，eLine电子移液器独具的可储存6个用户自定义常规工作一致性保证纪录和错误信息提示功能使操作更加智能化。

电动滴头排出设计：

eLine电子移液器采用革命性的电动滴头排出系统，只需轻轻一按即可将滴头排出。

产品编号	容量(μl)	增量(μl)	标准滴头(μl)
730020	0.2-10	0.1	10
730040	5-120	0.5	300, 350
730060	10-300	1.0	300, 350
730080	50-1000	5.0	1000
730100	100-5000	10	5000

芬兰BIOHIT公司系列产品：

- Proline系列单通道及多通道电子移液器
- Proline系列单通道及多通道手动移液器
- ePET系列单通道及多通道电子移液器
- Proline XL系列大容量电动移液器
- Midi plus大容量电动移液控制器
- Proline系列Prospenser瓶式分液器
- Proline系列高精密度移液器滴头

百得BIOHIT中国总代理：北京吉诺思科贸有限公司

北京总公司
北京市海淀区花园路4号
北京应用物会议中心131室
电话：(010) 82034498-95
传真：(010) 82034493
邮政编码：100088
电子信箱：info@geno-tech.com.cn

上海分公司
上海市北京西路1399号
建庆大厦17层A02室
电话：(021) 62890847、62891803
传真：(021) 62477927
邮政编码：200040
电子信箱：shanghai@geno-tech.com.cn

广州分公司
广东省广州市环市中路276号
国北大厦裕兴809楼科座
电话：(020) 83229630、83229632
传真：(020) 83229631
邮政编码：510060
电子信箱：guangzhou@geno-tech.com.cn

成都办事处
四川省成都市人民南路益道街20号
美华商务公寓楼16-19室
电话：(028) 86726918、86726928
传真：(028) 86726968
邮政编码：610016
电子信箱：chengdu@geno-tech.com.cn

免费咨询电话：800-810-0977

公司网站：<http://www.geno-tech.com.cn>